

Montaje de mangueras de las bombas sanitarias L/S®

Obtenga una conexión más rápida de las mangueras

Características/beneficios

- Satisface las exigentes demandas de la biotecnología, la industria farmacéutica y la industria de los alimentos, las bebidas y los lácteos
- Los extremos lisos y premoldeados de las mangueras permiten una rápida conexión a un adaptador o a otro tramo de manguera sanitaria
- Los conectores ayudan a mantener la limpieza y la pureza de los líquidos
- Las mangueras sanitarias tienen una conducción térmica menor en comparación con los sistemas de mangueras metálicas, y no sufren la acción galvánica, la RFI o la EMI.
- Todas las mangueras sanitarias PharMed® BPT y de silicona curada con platino L/S cumplen las normas de la FDA y de la clase VI de la USP.
- Puede obtener a solicitud su certificado de cumplimiento de las especificaciones del uso de resina y elastómero GRATIS

Cómo conectar las mangueras


- Cada tramo de manguera tiene extremos premoldeados Las mangueras con conexiones pequeñas de 1/2" utilizan una junta moldeada en uno de sus extremos para garantizar un sellado de calidad
- Los extremos premoldeados permiten una conexión rápida con un adaptador u otro tramo de manguera sanitaria Puede pedir adaptadores más abajo a la derecha.
- Una la conexión pequeña de 1/2" con otra conexión pequeña de 1/2", un adaptador u otro sistema con una abrazadera de apriete

Cómo hacer su pedido

1. Pida la forma y el largo de manguera que desee. Elija el tamaño de la manguera según el caudal (vea "Especificaciones" en las páginas 158 y 160).
2. Pida su abrazadera de apriete de PVDF (por separado a continuación).
3. Pida las juntas de silicona o Viton® que necesite para conectar su sistema o sus adaptadores.
4. Seleccione los adaptadores sanitarios que necesite



Mangueras de silicona curada con platino con conexiones pequeñas de 1/2"

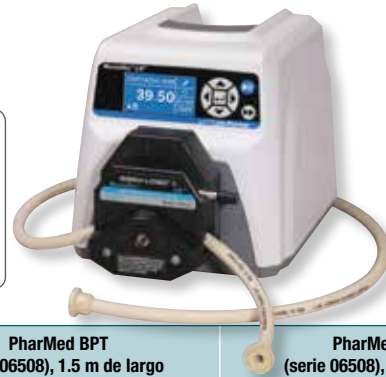

Tamaño de manguera	Silicona curada al platino (serie 96410), 1,5 m de largo		Silicona curada al platino (serie 96410), 3 m de largo		PharMed BPT (serie 06508), 1,5 m de largo		PharMed BPT (serie 06508), 3 m de largo	
	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio	Número de catálogo	Precio
Mangueras de las bombas de precisión L/S								
L/S 13	YV-96100-13		YV-96101-13		YV-96112-13		YV-96113-13	
L/S 14	YV-96100-14		YV-96101-14		YV-96112-14		YV-96113-14	
L/S 16	YV-96100-16		YV-96101-16		YV-96112-16		YV-96113-16	
L/S 25	YV-96100-25		YV-96101-25		YV-96112-25		YV-96113-25	
L/S 17	YV-96100-17		YV-96101-17		YV-96112-17		YV-96113-17	
L/S 18	YV-96100-18		YV-96101-18		YV-96112-18		YV-96113-18	
Mangueras de las bombas de precisión de alto rendimiento L/S								
L/S 15	YV-96100-15		YV-96101-15		YV-96112-15		YV-96113-15	
L/S 24	YV-96100-24		YV-96101-24		YV-96112-24		YV-96113-24	
L/S 35	—	—	—	—	YV-96112-35		YV-96113-35	
L/S 36	—	—	—	—	YV-96112-36		YV-96113-36	

Accesorios para mangueras de las bombas L/S



Abrazadera de apriete

Adaptadores

Ambos extremos de las mangueras con conexión pequeña de 1/2"

YV-31201-88 Abrazadera de apriete, de PVDF Para unir rápidamente dos conexiones pequeñas de 1/2"

Juntas. Pida juntas para unir una conexión pequeña de 1/2" sin una junta moldeada a otra conexión pequeña de 1/2" sin una junta moldeada o a un adaptador (se venden por separado; consulte a la derecha).

YV-30548-00 Junta de silicona para utilizar con mangueras sanitarias de silicona (curada con platino). Paquete de 10

YV-30548-20 Junta Viton® para utilizar con mangueras sanitarias PharMed® BPT. Paquete de 10

Adaptadores

Conexiones de adaptadores	Polipropileno		PVDF	
	N.º de cat.	Precio	N.º de cat.	Precio
Pequeña de 1/2" a NPT(M) de 1/8"	YV-31200-00		YV-31201-00	
Pequeña de 1/2" a NPT(F) de 1/8"	YV-31200-10		—	
Pequeña de 1/2" a NPT(M) de 1/4"	YV-31200-01		YV-31201-01	
Pequeña de 1/2" a NPT(F) de 1/4"	YV-31200-11		YV-31201-11	
Espiga para manguera pequeña de 1/2" a 1/4"	YV-31805-25		YV-31808-25	
Pequeña de 1/2" a NPT(M) de 3/8"	YV-31200-02		YV-31201-02	
Pequeña de 1/2" a NPT(F) de 3/8"	YV-31200-12		YV-31201-12	
Espiga para manguera pequeña de 1/2" a 3/8"	YV-31805-26		YV-31808-26	
Pequeña de 1/2" a NPT(M) de 1/2"	YV-31200-03		YV-31201-03	
Pequeña de 1/2" a NPT(F) de 1/2"	YV-31200-13		YV-31201-13	
Espiga para manguera pequeña de 1/2" a 1/2"	YV-31805-27		—	
Pequeña de 1/2" a grande de 1"	YV-31200-30		—	
Pequeña de 1/2" a Ladish de 1"	YV-31805-05		YV-31201-40	
Pequeña de 1/2" a luer lock hembra	YV-31200-50		YV-31201-50	